

QUAD LASER

Sistema de depilación




QUAD LASER



Teoría:

El sistema de depilación QUAD LASER adopta la teoría de la absorción selectiva de la luz, calentando el tallo del cabello y el folículo piloso para eliminarlo así como la organización del oxígeno alrededor de éste. De esta manera se obtiene el propósito de la depilación permanente.

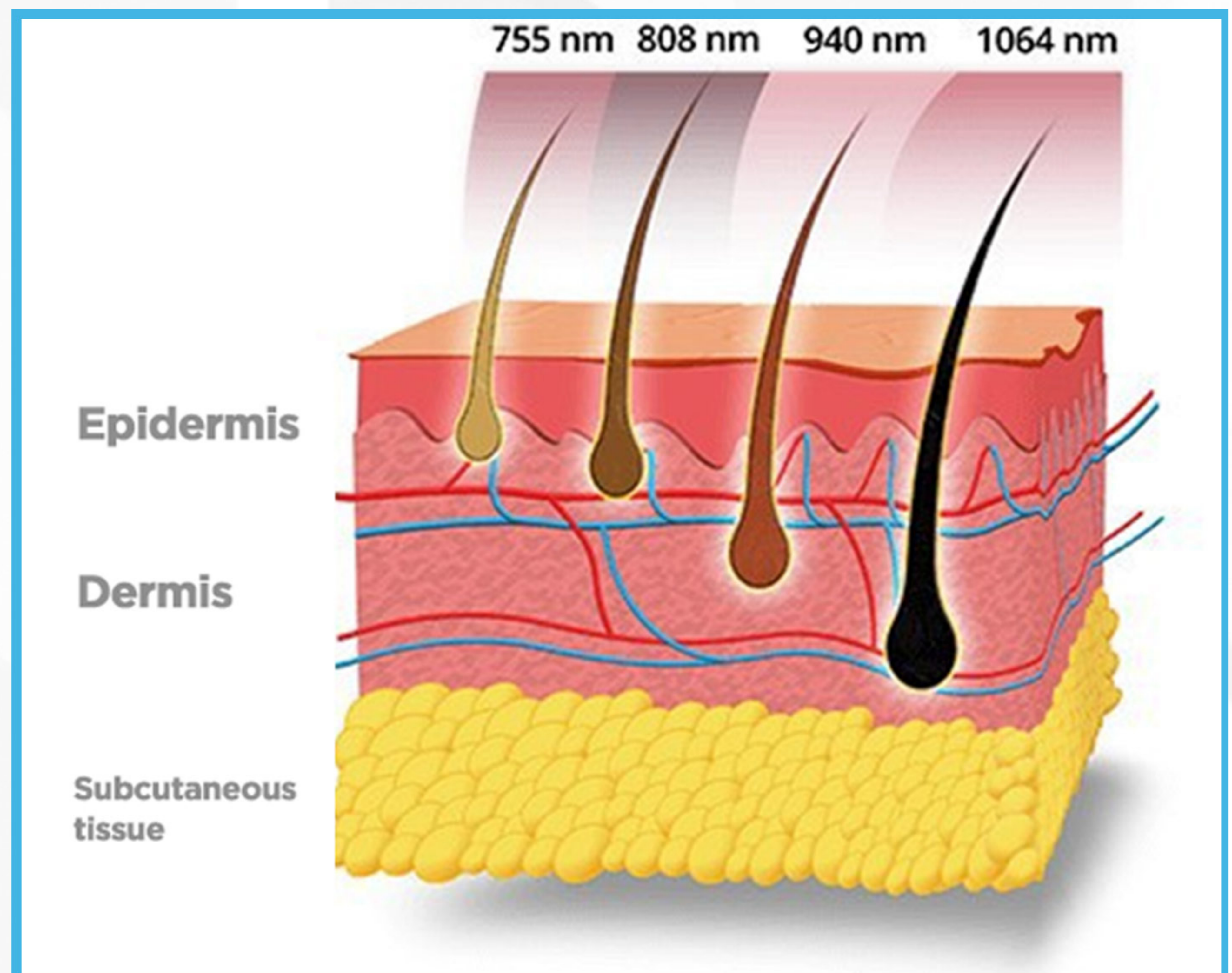

QUAD LASER



4 longitudes de onda

- 755nm se dirige a la protuberancia del folículo piloso con una penetración más superficial y es especialmente eficaz para el cabello incrustado superficialmente en áreas como las cejas y el labio superior.
- 808nm ofrece una penetración profunda del folículo piloso con alta potencia media, una alta tasa de repetición y un gran tamaño de punto de 2 cm para un tratamiento rápido. Tiene un nivel de absorción de melanina moderado por lo que es seguro para los tipos de piel más oscura.
- 940nm coagula los microvasos alrededor del folículo piloso, cortando los nutrientes que provisionan a éstos folículos, reduciendo de una manera drástica el poder de regeneración del cabello e inhibiendo completamente su regeneración.
- 1064nm ofrece la penetración más profunda del folículo piloso, lo que le permite apuntar el bulbo y la papila, así como tratar el cabello profundamente incrustado en áreas como el cuero cabelludo, las axilas y las áreas púbicas.



QUAD LASER



VENTAJAS TÉCNICAS

1 Manípulo

- El tamaño de spot grande ofrece una gran cobertura y reduce enormemente el tiempo de tratamiento.
- 755nm + 808nm + 940nm + 1064nm salida mixta, destruye los folículos pilosos y corta el suministro de sangre a los folículos pilosos, evita los efectos secundarios postoperatorios.
- La alta potencia de 1600W garantiza la máxima seguridad y eficacia.
- La aplicación más ligera pesa 0,7 kg.



2 Punta cónica

- Punta cónica que facilita la cirugía en la depilación de áreas pequeñas




QUAD LASER



VENTAJAS TÉCNICAS

3 4 longitudes de onda

- El sistema de protección inteligente garantiza la cirugía segura
- El icono de 6 áreas registra el número de disparo
- Hasta 4 longitudes de onda para eliminar de forma permanente y segura cualquier tipo de vello en todo tipo de piel.

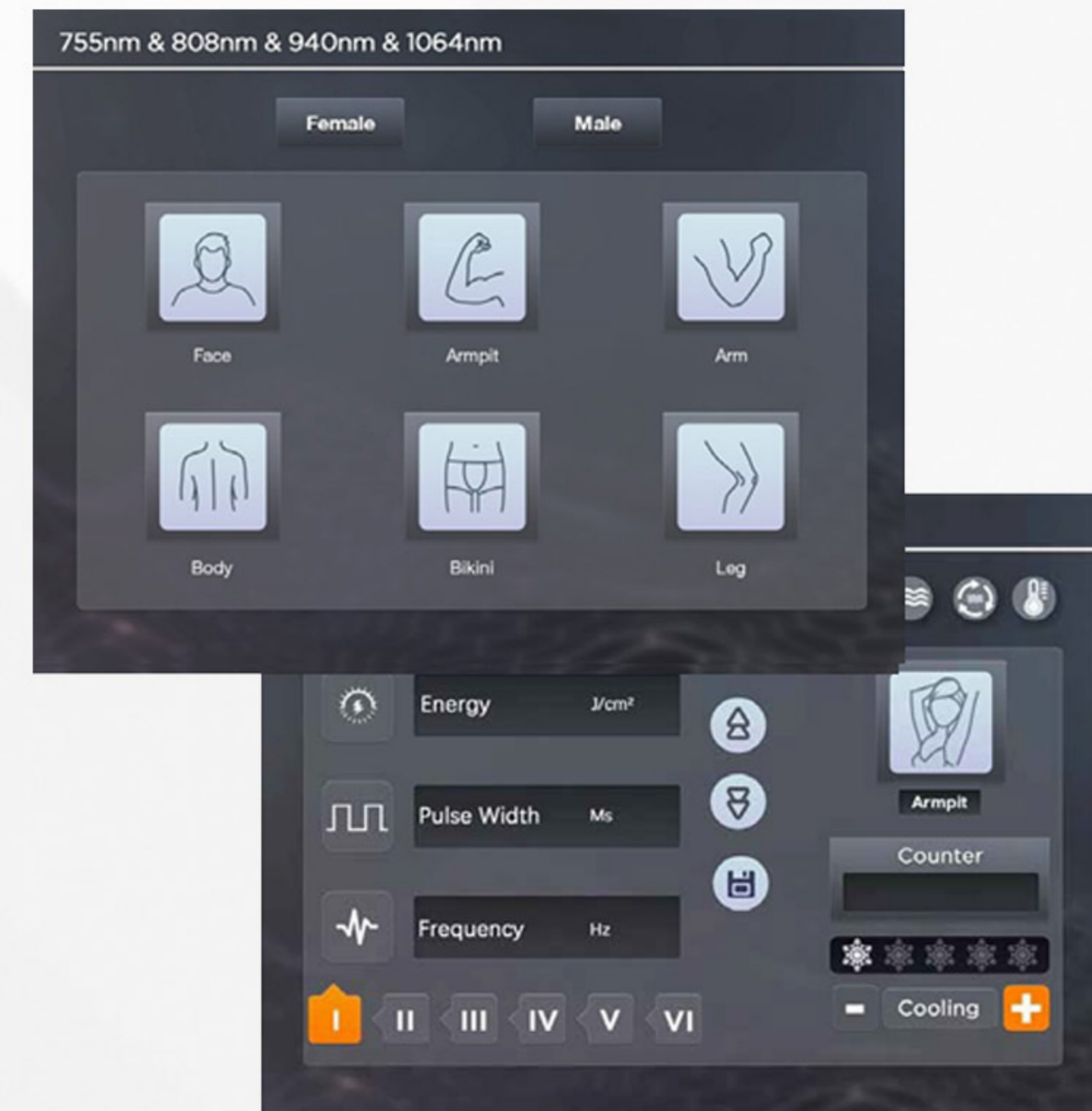

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LÁSER	755nm/808nm/940nm/1064nm
POTENCIA	3000W
ENERGÍA	2-120 j/cm2 ajustable
SPOT	12mm*16mm
PESO	53.5 Kg