

SMART BODY



SMART BODY




SMART BODY: LA REVOLUCIÓN EN REMODELACIÓN CORPORAL

SMART BODY es un innovador dispositivo diseñado para satisfacer las necesidades de centros estéticos y nuevos negocios que buscan ofrecer los tratamientos más demandados para la reducción de grasa y tonificación muscular. Este equipo único combina dos tecnologías de vanguardia en un solo sistema compacto y accesible: Criolipólisis y EMS HIFEM + RF.

Criolipólisis: Aprobada por la FDA desde la década de 1990, la criolipólisis es un método eficaz y comprobado para eliminar la grasa corporal de forma segura y no invasiva. Utiliza el frío para congelar y destruir las células adiposas de manera selectiva, sin afectar los tejidos circundantes. SMART BODY cuenta con dos manípulos de criolipólisis 360° que incorporan la exitosa tecnología CRIO 360°, permitiendo tratar diversas zonas del cuerpo con precisión y obtener resultados excepcionales en la reducción de medidas.

EMS HIFEM + RF: EMS HIFEM (Electroestimulación Muscular de Alta Intensidad y Enfoque Electromagnético) es la tecnología líder en tonificación muscular a nivel mundial. SMART BODY incorpora dos manípulos planos de EMS que emiten ondas electromagnéticas de alta intensidad que penetran profundamente en los músculos, provocando contracciones supramaximales imposibles de lograr con ejercicio convencional. Adicionalmente, estos manípulos integran tecnología de radiofrecuencia (RF) que genera un efecto térmico controlado, estimulando la producción de colágeno y elastina, mejorando la calidad de la piel y potenciando los efectos de remodelación.

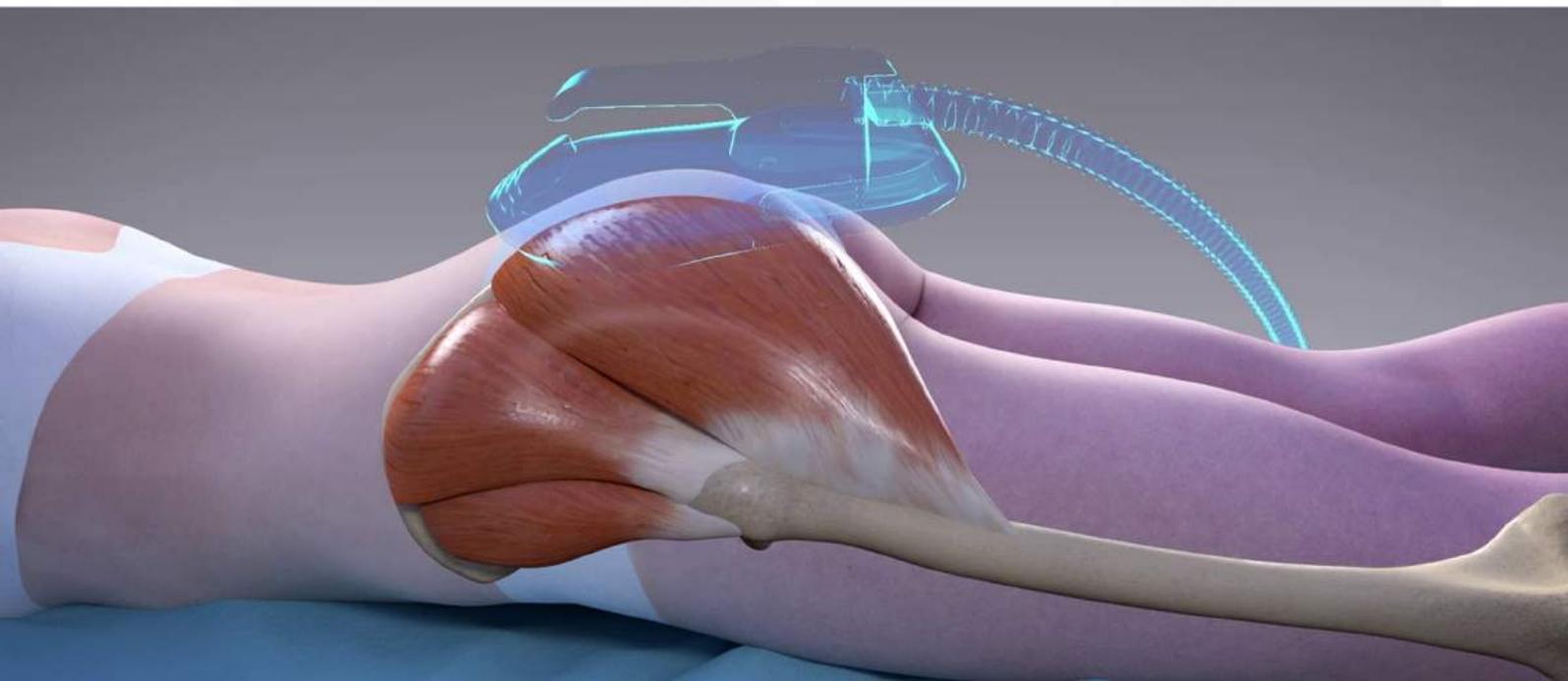

SMART BODY



LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA RESULTADOS SUPERIORES:

SMART BODY combina las tecnologías de criolipólisis y EMS HIFEM + RF de manera sinérgica para ofrecer un tratamiento integral y efectivo para la remodelación corporal. La criolipólisis elimina la grasa localizada, mientras que EMS HIFEM tonifica y define los músculos, esculpiendo un cuerpo armonioso y proporcionado. La radiofrecuencia (RF) complementa estos tratamientos mejorando el aspecto y la firmeza de la piel.

BENEFICIOS DE SMART BODY:

- **Equipo completo para tratamientos corporales:** SMART BODY ofrece una solución completa para la reducción de grasa, tonificación muscular y mejora de la calidad de la piel.
- **Tecnología de vanguardia:** Combina las tres tecnologías más avanzadas en el campo de la estética corporal: criolipólisis, EMS HIFEM, y radiofrecuencia (RF).
- **Resultados excepcionales:** SMART BODY proporciona resultados visibles y duraderos en la reducción de medidas, tonificación muscular, celulitis y flacidez.
- **Tratamiento seguro y no invasivo:** SMART BODY no requiere cirugía ni anestesia, y los procedimientos son rápidos y cómodos para los pacientes.
- **Precio accesible:** SMART BODY ofrece una excelente relación calidad-precio, lo que lo convierte en una inversión ideal para centros estéticos y nuevos negocios.

SMART BODY: LA ELECCIÓN INTELIGENTE PARA SU NEGOCIO:

Si busca ofrecer a sus pacientes los tratamientos más demandados para la remodelación corporal con tecnología de vanguardia y resultados excepcionales, SMART BODY es la solución perfecta para usted. Este equipo compacto, accesible y fácil de usar le permitirá ampliar su oferta de servicios y atraer a nuevos clientes. SMART BODY es la revolución para los tratamientos de estética corporal.

SMART BODY



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	SMART BODY
Power Cryo	800W
Tecnología Criolipólisis	360°
Cryo Temperature	-15°C ~ 0°C
Vacuum Fluency	30L/min
Vacuum Pump	Double
Vacuum Pressure	0-96kpa
Cryo Handles	2
EMS Technology Dual	HIFEM + RF
EMS Handles	2
EMS Intensity	0-14 Tesla
EMS Frequency	1-150Hz
RF Power	120W
RF Temperature	65°C max
RF Frequency	1 Mhz
Voltage/Current	220V/15A