

# NEO LASER CO2




# NEO LASER CO2



La nueva tecnología NEO del Láser Co2 de ESTETIKA MEDIKA incorpora la última tecnología americana **Co2 Metal Tube** asegurando mayor precisión y durabilidad que la tecnología Glass Tube utilizada anteriormente. Asimismo incorpora 60W de potencia la cual es una capacidad suficiente para todo tipo de tratamiento dermatológico y ginecológico.

Asimismo, La tecnología fraccional es un punto de referencia para la eficiencia y la comodidad en los procedimientos de rejuvenecimiento con láser el

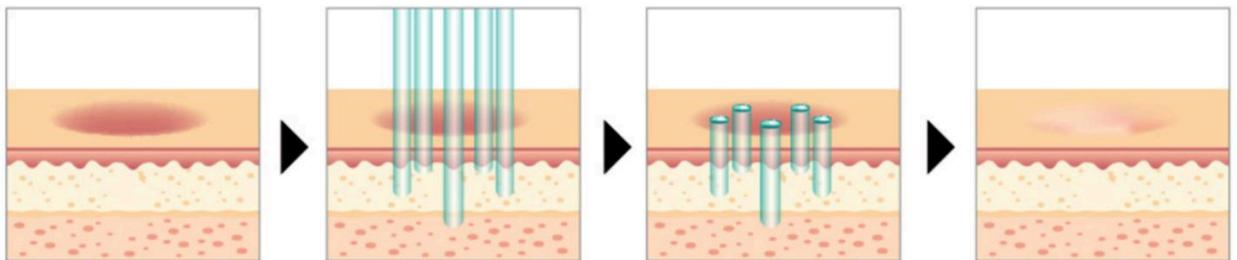

cual emite pequeños rayos de energía láser que penetran en la piel en forma de columnas térmicas hasta la dermis dejando tejido no tratado entre ellas. La energía del láser se deposita en el tejido con un patrón de disparos aleatorios que alternan las áreas tratadas con láser con las de la piel intacta. Esto proporciona una recuperación más rápida y la regeneración de tejidos y es un tratamiento prácticamente indoloro.

# NEO LASER CO2



El láser CO2 hoy es un estándar para el tratamiento ginecológico brindando muy buenos resultados ante diversas afecciones. La nueva tecnología de NEO Láser CO2 incorpora cabezales diferenciados para vagina y vulva lo cual permite resultados mucho más satisfactorios en los tratamientos.



Gynecological  
Head



Vulva  
Head

NEO Láser CO2 incorpora adicionalmente un cabezal fraccional y cabezales quirúrgicos de 50mm y 100mm.



Fraccional  
Head




Surgery  
Pieces

# NEO LASER CO2



NEO LASER CO2 de ESTETIKA MEDIKA es el único que incorpora una unidad interna de esterilización de piezas haciendo mucho más eficiente y seguro los tratamientos debido a poder contar con un espacio dedicado e independiente al sistema para la esterilización de las diversos cabezales de este dispositivo de grado médico.

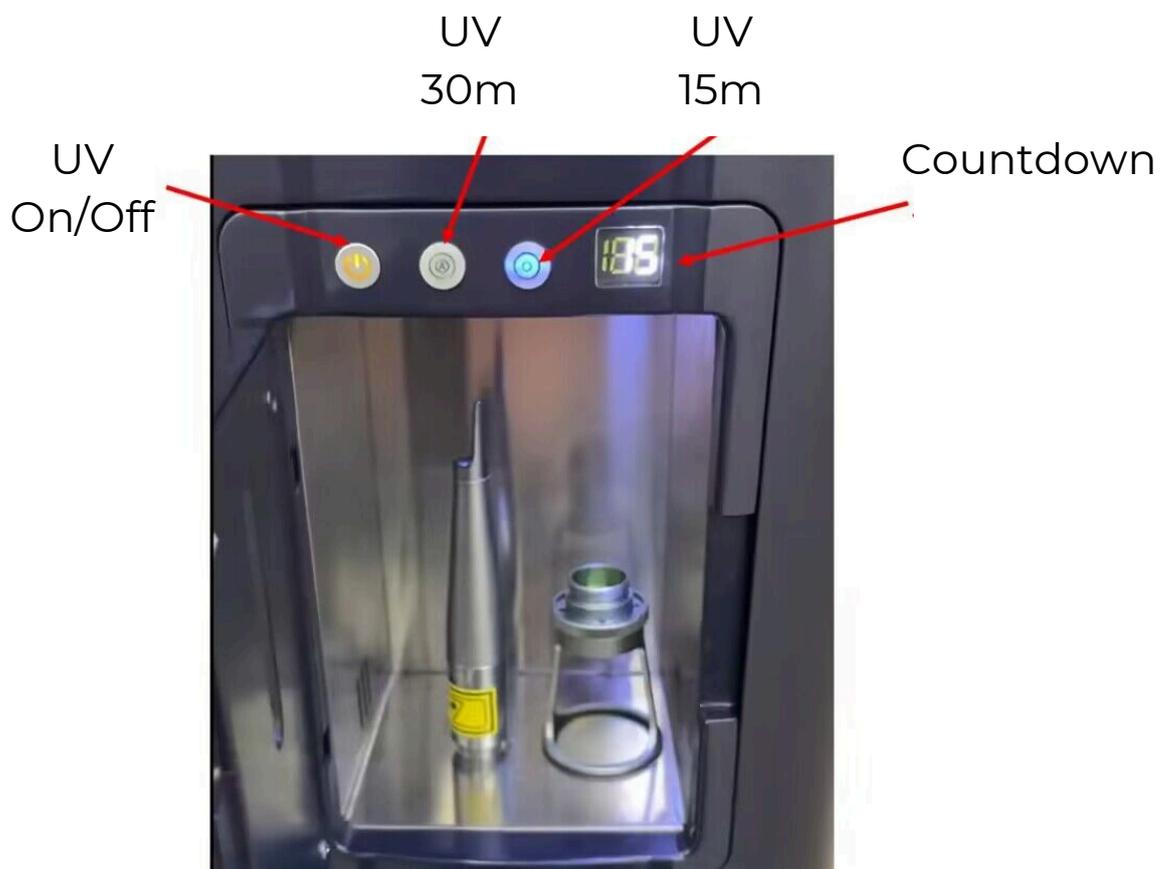

Sterilization  
Unit

# NEO LASER CO2



## APLICACIONES

- Cicatrices de Acné
- Rejuvenecimiento
- Eliminación arrugas
- Eliminación Poros
- Eliminación de cicatrices
- Dermatitis hormonal
- Tensado vaginal
- Rejuvenecimiento vulvar
- Nevus pigmentados
- Lunares
- Condilomas
- Verrugas
- Otros

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>LONGITUD DE ONDA</b>	10600nm
<b>POTENCIA</b>	60 WATTS
<b>TIPO LÁSER</b>	ULTRA PULSE Y CW
<b>MODO TRATAMIENTO</b>	FRACCIONAL, SURGERY, GYN, VULVE
<b>AREA ESCANEAO MAX</b>	20mm x 20mm
<b>MODO FIGURA</b>	RECTANGULO, CUADRADO, TRIANGULO, REDONDO, HEXÁGONO, LINEAL
<b>MODO</b>	NORMAL, CENTRAL, ALEATORIO
<b>PANTALLA</b>	12"
<b>VOLTAJE</b>	220/110 VOLT, 50/60 HZ