

SCULPT BODY RF



**+ 25% MÚSCULO
- 30% GRASA**

SCULPT BODY RF



POTENCIA FUERTE DE 5000W 4 MANÍPULOS FUNCIONAN SIMULTÁNEAMENTE

SCULPT BODY RF se basa en un aplicador que emite simultáneamente RF sincronizada y energías electromagnéticas enfocadas de alta intensidad.

Gracias al calentamiento por radiofrecuencia, la temperatura del músculo aumenta rápidamente varios grados. Esto prepara los músculos para la exposición al estrés, similar a lo que hace una actividad de calentamiento antes de cualquier entrenamiento. En menos de 4 minutos, la temperatura de la grasa subcutánea alcanza niveles que provocan apoptosis, es decir, las células grasas se dañan permanentemente y son eliminadas a través del sistema linfático. Los estudios clínicos mostraron en promedio una reducción del 30% en la grasa subcutánea.

La energía electromagnética enfocada de alta intensidad contrae las fibras musculares en intensidades que no se pueden lograr por medio de ejercicio. El estrés extremo obliga al músculo a adaptarse, lo que resulta en un aumento en el número y crecimiento de fibras y células musculares. Los estudios clínicos mostraron en promedio un 25% aumento del volumen muscular.





SCULPT BODY RF



SCULPT BODY RF induce contracciones musculares muy fuertes (supramaximales), no alcanzable a través del entrenamiento. Cuando se expone, al músculo, a estas fuertes contracciones, el tejido se ve obligado a adaptarse a condiciones tan extremas. El músculo comienza a remodelar su estructura interna por multiplicación de fibras y su crecimiento. La alta intensidad electromagnética utiliza un rango específico de frecuencias que no permite la relajación muscular, accionando diversas estimulaciones consecutivas. Cuando se expone repetidamente a estas condiciones de alta carga, el tejido muscular se estresa y se ve obligado a adaptarse. Estudios recientes informaron que en promedio de edad, se observó un aumento del 15 % al 16 % en el grosor de los músculos abdominales en los pacientes tratados uno a dos meses después de los tratamientos electromagnéticos enfocados de alta intensidad.

MECANISMO DE CONTRACCIÓN MUSCULAR

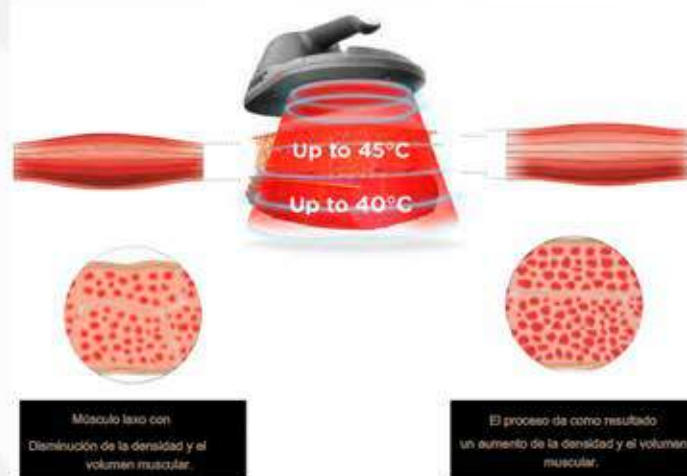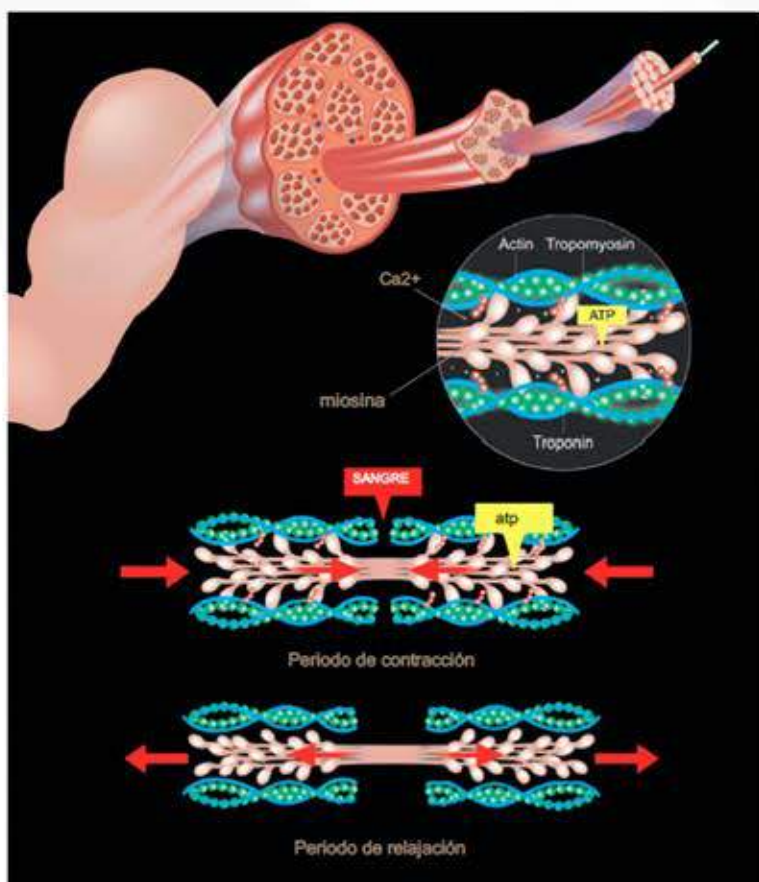

Los impulsos nerviosos desencadenan una reacción bioquímica que hace que la miosina se adhiera a la actina.

SCULPT BODY RF



ASIENTO PÉLVICO (OPCIONAL)

El dispositivo para piso pélvico actúa para aliviar la incontinencia mediante estimulación.

Fortalecer los músculos subyacentes del piso pélvico.

Durante el tratamiento, usted se sienta en un cojín especialmente diseñado que entrega energía electromagnética a los músculos del piso pélvico, obligándolos a contraerse sobre él. Durante el tratamiento, estas contracciones fortalecen los músculos debilitados y restauran el control neuromuscular de la vejiga.



MANGO PLANO



ABDOMEN

NALGAS

MUSLOS

ATRÁS

MANGO CURVO



BRAZOS

PANTORILLAS



SCULPT BODY RF



El **SCULPT BODY RF** trabaja en la zona del abdomen contrayendo y tensando el músculos para quemar grasa y esculpir la zona. Este tratamiento puede ayudar a reducir ese centímetro rebelde de grasa en el estómago.

SCULPT BODY RF PARA EL ABDOMEN





Tipo h

Tipo plegable

Tipo de grasa

Después del parto

Desarrollar músculos abdominales perfectos y firmes en línea V

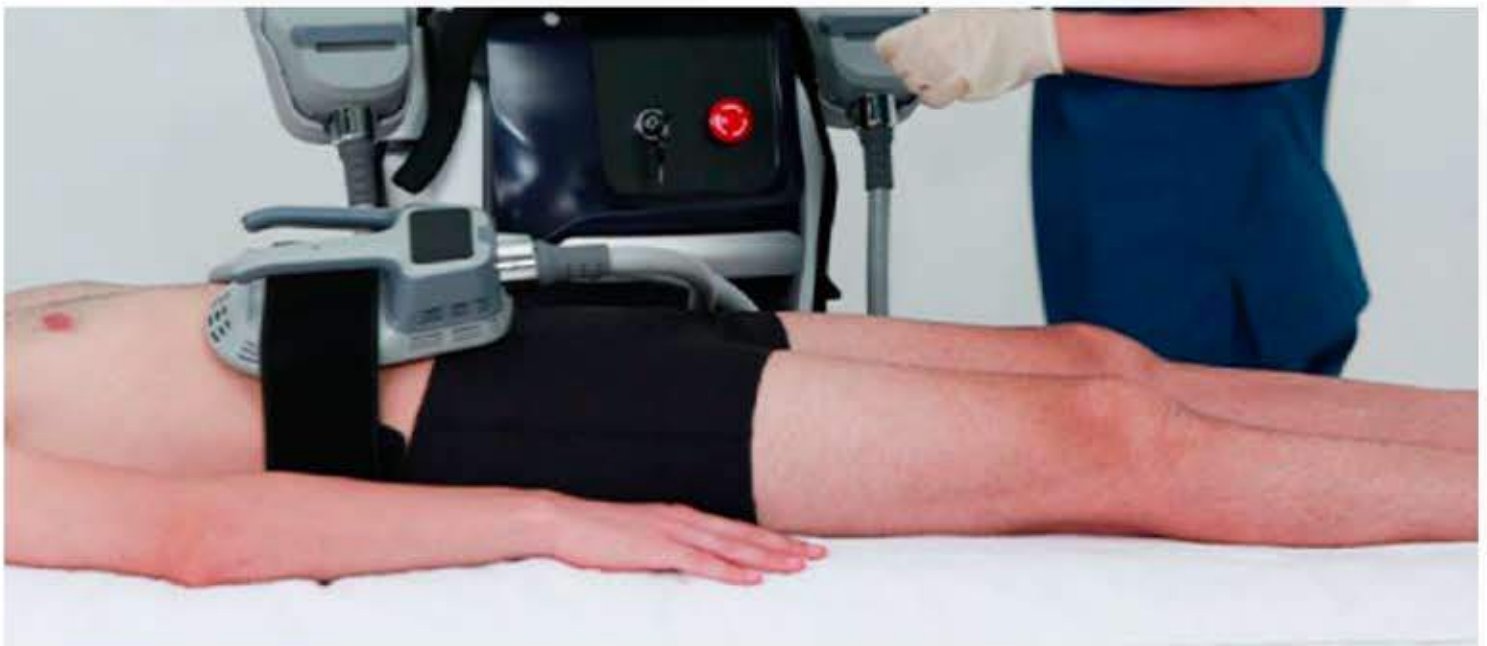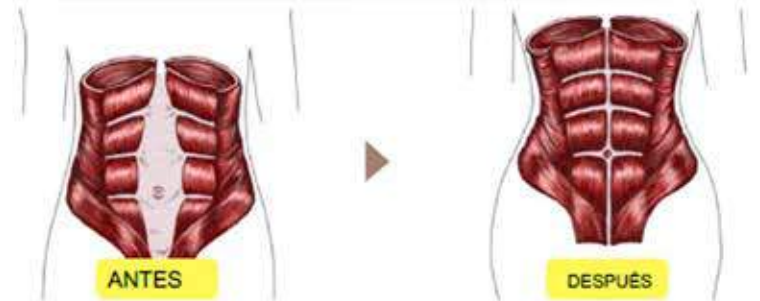

SCULPT BODY RF



SCULPT BODY RF también actúa en los glúteos, utilizando el mismo efecto supramáximo de contracciones musculares como en el área del abdomen.

Muchos pacientes optan por probar este tratamiento en lugar de un levantamiento de glúteos invasivo. La tecnología electromagnética enfocada de alta intensidad ofrece el primer procedimiento de levantamiento de glúteos no invasivo del mundo. Este tratamiento puede conseguir la curvatura, el tono y la elevación que deseas. Es una alternativa al procedimiento de elevación invasiva y proporciona una forma definida en lugar de añadir exceso de grasa a la zona.

SCULPT BODY RF PARA NALGAS



Tipo M

Parto del parto

Caderas anchas

Tipo V

Tipo ideal nalgas de durazno



Before



After



SCULPT BODY RF



SISTEMA OPERATIVO INTELIGENTE

SELECCIÓN DE GÉNERO

Masculino | Femenino

SELECCIÓN DEL ÁREA DE TRATAMIENTO

Nalga | Abdomen | Muslo | Brazo

SELECCIÓN DEL MODO DE TRABAJO

Hiit | Strength | Muscle Building | Shape Up | Fat Burning



El nuevo sistema operativo inteligente puede hacer coincidir automáticamente diferentes parámetros de tratamiento según las diferentes partes del cuerpo; al mismo tiempo, está equipado con cinco diferentes modos de trabajo para hacer coincidir directamente los parámetros de tratamiento correspondientes según las necesidades de tratamiento de los clientes. Extremadamente fácil de operar

SCULPT BODY RF



COMPARACIÓN:

SCULPT BODY RF

Tecnología	Electromagnético enfocado de alta intensidad + RF
Qué puede hacer	Desarrolla y tonifica los músculos, quema grasa, tensa la piel.
¿Qué trata?	Músculo + Grasa + Piel
cuanto dura el tratamiento	30 minutos
cuantas sesione	4 mínimo
Sin contacto o no	Necesita estar en la piel para hacer contacto.
Malestar	Ninguno
Recuperación	Absolutamente ninguno
¿Con qué frecuencia se debe recibir?	Entre 13 meses, variable
requisito de IMC	Hasta IMC de 35

SCULPT BODY

Tecnología	Electromagnético enfocado de alta intensidad
Qué puede hacer	Construir y tonificar el músculo
¿Qué trata?	Músculo
cuanto dura el tratamiento	30 minutos
cuantas sesione	4 mínimo
Sin contacto o no	Puede estar en la piel o sobre la ropa.
Malestar	Ninguno
Recuperación	Absolutamente ninguno
¿Con qué frecuencia se debe recibir?	Entre 13 meses, variable
requisito de IMC	Hasta IMC de 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Triple frecuencia:	1-150hz
Potencia de RF:	800W
Fuerza:	5000w
Intensidad:	7 Teslas
Pantalla:	pantalla touch 15"
Ancho de pulso:	310us+10%
Enfriamiento:	Sistema de aire multifocal
Voltaje:	220V 10A 50HZ